
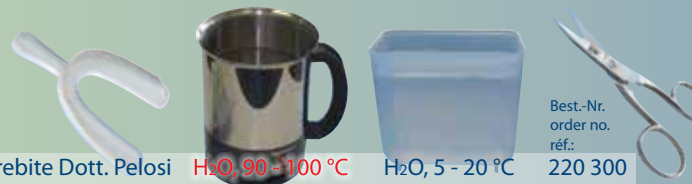


prebite ^{Dott.} Pelosi

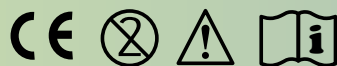

1. prebite Dott. Pelosi H₂O, 90 - 100 °C H₂O, 5 - 20 °C 220 300

Best.-Nr.
order no.
réf.:
220 300

DE

Sofortschiene, temporäre Aufbisschiene zur sofortigen Schmerzbeseitigung und zur Prüfung der Wirksamkeit von Schienen.

1. Arbeitsmittel
2. Ggf. Kausystem entspannen.
- 3./4. Prebite Dott. Pelosi mit einer Pinzette 15 - 20 Sek. in 90 - 100 °C heißes Wasser halten.
- 5./6. Kurz in kaltes Leitungswasser tauchen
7. Auf die UK-Zahnreihe aufsetzen.
8. Vestibulär andrücken und Patient kräftig zubeißen lassen. Wenn nötig Schritt 2. - 6. wiederholen.
- 9./10. Entnehmen und Griff abschneiden.
11. Linguale Überstände abschneiden
12. Wenn gewünscht mit Lisko-S (223 200) oder Lisko weiß (223 100) Schnittkanten glätten.
- 13./14. Fertig

EN

Immediate splint, temporary adjusted splint for immediate pain release and splint effectiveness testing.

1. Equipment
2. If necessary, relax the masticatory system.
- 3./4. Put prebite Dott. Pelosi using a pair of tweezers for 15 - 20 seconds in 90 - 100 °C hot water.
- 5./6. Shortly dip in cold tap water.
7. Place onto the bottom teeth.
8. Press on vestibularly and have the patient bite firmly. If necessary, repeat steps 2. - 6.
- 9./10. Take out and cut handle.
11. Cut excess lingual length.
12. If desired, smooth cutting edges with Lisko-S (223 200) or Lisko white (223 100).
- 13./14. Finished

FR

Gouttière immédiate, gouttière occlusale temporaire pour un soulagement immédiat de la douleur et pour tester l'efficacité des gouttières.

1. Équipement
2. Éventuellement détendre le système masticatoire.
- 3./4. Tenir prebite Dott. Pelosi avec une pincette pour 15 - 20 sec. dans 90 à 100 °C l'eau chaude.
- 5./6. Brielèvement plonger dans l'eau de robinet froide.
7. Placer sur les dents de la mâchoire inférieure.
8. Appuyer vestibulairement et faire le patient mordre fortement. Si nécessaire, répéter étapes 2. - 6.
- 9./10. Enlever et découper le manche.
11. Découper des débords linguaux.
12. Si désiré, lisser les arêtes de coupe avec Lisko-S (223 200) ou Lisko blanc (223 100).
- 13./14. Fini

ES

Férula inmediata, férula oclusal temporal para la reducción inmediata del dolor y para testar la efectividad de las férulas.

1. Equipamiento
2. Eventualmente, relajar el sistema masticatorio.
- 3./4. Con unas pinzas, mantener el prebite Dott. Pelosi de 15 a 20 seg. en agua caliente a 90 - 100 °C.
- 5./6. Sumergir brevemente en agua fría.
7. Colocar sobre los dientes del maxilar inferior.
8. Presionar vestibularmente y hacer que el paciente muerda con fuerza. Si fuese necesario, repetir los pasos 2. - 6.
- 9./10. Sacar y cortar el mango.
11. Cortar el exceso de longitud por lingual.
12. Si se desea, suavizar los bordes del corte con Lisko-S (223 200) o Lisko blanco (223 100).
- 13./14. Listo

IT

Bite immediato, placca occlusale temporanea per la riduzione immediata del dolore e bite per prova funzionale.

1. Attrezzatura
2. Eventualmente rilassare il sistema masticatorio.
- 3./4. Immergere il prebite Dott. Pelosi con una pinzetta per 15 - 20 sec. in acqua bollente a 90 - 100 °C.
- 5./6. Raffreddarlo brevemente in acqua fredda.
7. Posizionarlo sopra l'arcata inferiore.
8. Tenere premuta la parte vestibolare e fare mordere energicamente il paziente. Se necessario ripetere i punti 2. - 6.
- 9./10. Rimuovere e tagliare il manico.
11. Rifilare le eccedenze sulla parte linguale.
12. Se si desidera levigare i bordi utilizzare Lisko-S (223 200) o Lisko bianco (223 100).
- 13./14. Pronto



prebite dott. Pelosi: EVA, 95 Shore-A EVA

Best.-Nr./order no./réf.: prebite dott. Pelosi **85 10 20**, 20 prebites prebite dott. Pelosi up **85 10 16**, 16 prebites